


 schuchmann®



NEUHEITEN

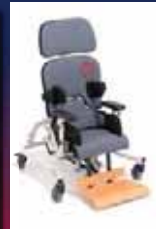

INNOVATION IN DER KINDER-



Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Behinderten, Eltern, Mitarbeitern der Sanitätshäuser sowie Ärzten und Therapeuten ermöglicht uns den individuellen Herausforderungen einer modernen Hilfsmittelversorgung gerecht zu werden. „Innovation in der Kinder-Reha“ steht für die kontinuierliche Verbesserung und den stetigen Fortschritt unserer Hilfsmittel.

In diesem Prospekt zeigen wir Ihnen daher mit Freude unsere Neuheiten MADITA, MADITA-FUN, TODD, TIM, TONI, BASTI und SMILLA.

Besonders hervorzuheben sind unsere neu entwickelten Therapiestühle MADITA und MADITA-FUN. Neben einem großartigen und modernen Design, stehen hier Innovationen im Mittelpunkt, die eine erweiterte Einsatzmöglichkeit und Funktionalität bieten.

Detaillierte Informationen sowie Daten zu unseren Neuheiten finden Sie in diesem Prospekt und auf unserer Homepage unter www.schuchmann-reha.de

Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

Ihr Schuchmann-Team



**MADITA und
MADITA-FUN** Seite 4-11



TODD Seite 12-15



TIM Seite 16-17



TONI Seite 18-19



BASTI Seite 20-21



SMILLA Seite 22-23

...UNSERE NEUHEITEN

MADITA + MADITA-FUN

...mehr als nur ein Therapiestuhl





Die Therapiestühle MADITA und MADITA-FUN sind über Jahre und in vielen Anwendungen erprobte und bewährte Hilfsmittel. In der neuen Version der Therapiestühle MADITA und MADITA-FUN wurden daher zahlreiche Anregungen von Eltern, Therapeuten, Technikern und Kindern berücksichtigt.

Die Proportionen der Therapiestühle wurden überarbeitet, die Größe 0 in der Gesamtbreite reduziert und das Design wurde modern und aufgeräumt gehalten.

Grundattribute wie Stabilität, gute Anpassbarkeit und Alltagstauglichkeit, für die die MADITA bekannt ist, sind weiter verbessert worden. Neue Optionen und Konfigurationsmöglichkeiten erweitern die Einsetzbarkeit und den therapeutisch-medizinischen Nutzen. Aktives Sitzen wird durch den abnehmbaren Rücken ermöglicht und die einstellbare Beckenführung sorgt für eine stabile Basis beim Sitzen. Ebenfalls ist eine abduzierbare Beiführung mit Einzelfußstützen möglich, die die

individuellen Anpassmöglichkeiten und den Nutzen für Kinder und Jugendliche verbessert.

Mit Hilfe von MADITA können Kinder und Jugendliche am Tagesgeschehen, wie den gemeinsamen Mahlzeiten, Spielen und Lernen, wie selbstverständlich teilnehmen. MADITA und MADITA-FUN sind wahre Hilfen im Alltag wie uns viele Kinder, Eltern und Therapeuten bestätigen.

...MADITA + MADITA-FUN

MADITA

...mehr als nur ein Therapiestuhl



Abb. Grundmodell MADITA Gr.1
zusätzlich mit Kopfstütze, Seitenpelotten und Oberschenkelführung




einstellbare Sitzmaße



Sitzkantelung per Gasdruckfeder



Sitzhöhenverstellung per Gasdruckfeder

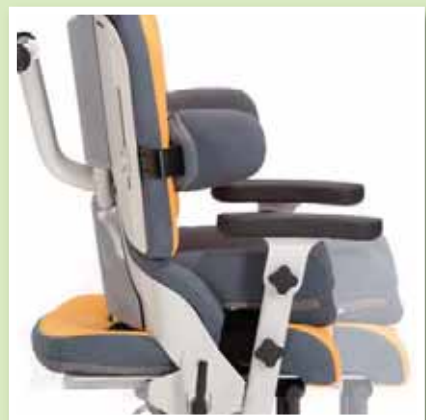

Sitztiefenverstellung

Die MADITA Therapiestühle ermöglichen durch individuell einstellbare Sitzmaße und unterstützende Pelotten eine stabile und aufrechte Sitzposition. Die bewährten Grundfunktionen der MADITA ermöglichen weiterhin die Sitzposition schnell an die jeweilige Tagessituation anzupassen. So ist die Sitzhöhe bei MADITA mittels Gasdruckfederunterstützung an unterschiedliche Tisch- oder Spielhöhen anpassbar.

Die Sitzkantelung ist bewusst per Gasdruckfeder verstellbar, so dass auch im normalen Tagesablauf zu Hause oder in einer Einrichtung der Sitzwinkel schnell und einfach an die aktuelle Verfassung

des Kindes angepasst werden kann. Der MADITA Therapiestuhl ist bei Bedarf mit leichter Vorneigung einstellbar. Hierdurch werden Aktivitäten erleichtert und die Aktivierung der Rückenmuskulatur kann gefördert werden. Ebenso kann eine Rücklage eingestellt werden, so dass durch Belastungsänderungen im Gesäß- und Rückenbereich nötige Entspannungsphasen ermöglicht werden.

MADITA-FUN

...mehr als nur ein Theraphiestuhl





Sitzhöhereinstellung bis auf Spielebene



Sitzkanteler per Gasdruckfeder

MADITA-FUN erweitert den Nutzen des Therapiestuhls MADITA um die Sitzhöhereinstellung von jeder gängigen Tischhöhe bis zum Fußboden.

Durch diese Möglichkeit wird die Integration der Kinder in der Frühförderung, dem Kindergarten, der Schule und zu Hause bedeutend vereinfacht. So können Kinder an gemeinsamen Aktivitäten in der Küche, am Waschbecken, am Tisch oder auf dem Boden teilnehmen. Durch die gute

Einstellbarkeit der Sitzeinheit wird ein sicheres Sitzen ermöglicht und dem Kind mehr Freiraum für Aktivitäten mit den Armen gegeben.

Die MADITA-FUN unterstreicht die Grundidee der Teilhabe und Integration.



...MADITA-FUN

MADITA + MADITA-FUN

...mehr als nur ein Therapiestuhl



Zur Aktivierung der Rücken- und Nackenmuskulatur kann die Sitzneigung auch aktiv nach vorne eingestellt werden. Diese Funktion kann mit der neuen Option des abnehmbaren Rückens wesentlich besser genutzt und für das Kind spürbar gemacht werden. So gewährleistet bei abgenommenen Rücken die Beckenführung weiterhin eine sichere und stabile Basis für das Becken und somit der Sitzposition. Die Freiheit, die dem Kind im oberen Bereich des Rückens gegeben wird, motiviert zu mehr Aufrichtung und bietet mehr Platz für Aktivität. Diese Funktion kann in den Therapieplan eingebaut und auch für kurze Zeitabschnitte genutzt werden, da der obere Rücken samt Kopfstütze schnell wieder aufzustecken ist und dem Kind bei Ermüdung Anlage und Unterstützung bietet.



Die einstellbare Beckenführung bietet dem Kind viel Sicherheit und positioniert das Becken. Fehlhaltungen durch das Ausweichen des Beckens zur Seite können weitestgehend mit dieser Option vermieden werden.



Eine medizinisch notwendige Abduktion der Oberschenkel kann mittels der Beinführungsoption und Einzelfußstützen mit der neuen MADITA-Serie sehr genau eingestellt werden. Ebenso ist eine Sitztiefendifferenz durch diese Option im Sitz einstellbar.

...MADITA + MADITA-FUN

TODD

...wendig in jeder Situation





Dreidimensional einstellbare Kniepelotten



Die Gesäßpelotte ist per Handkurbel in der Tiefe verstellbar



Gesäßpelotte wird beim Transfer eingesetzt und ist selbstsichernd

Der fahrbare Stehtrainer TODD ist in 4 Größen erhältlich und bietet maximale Mobilität im Stehen. Über zwei große Antriebsräder ist es dem Kind oder Jugendlichen möglich, selbständig und selbstbestimmt in die gewünschte Räumlichkeit zu wechseln. Darüber hinaus wird beim TODD, neben dem medizinisch-therapeutischen Nutzen eines stationären Stehtrainers, im besonderen Maße die Rumpf- und Armmuskulatur gefördert.

Durch höhen-, breiten- und tiefenverstellbare Körperstützen ist eine Anpassung an das Wachstum des Kindes oder Jugend-

lichen im Rumpf und den Extremitäten möglich. Mittels einer Hand-Kurbel ist die Gesäßpelotte in der Tiefe zu verstellen, um so einer vorhandenen Knie- oder Hüftbeugekontraktur entgegen zu wirken. Die kombinierte Spinen- und Beckenpelotte positioniert in Wechselwirkung mit der Gesäßpelotte das Becken und fördert dadurch die Aktivität im Rumpf und in den oberen Extremitäten.



Kombinierte Spinen- und Beckenpelotten

TODD

...wendig in jeder Situation





TODD kann stufenlos bis zu 15° in die Vorlage gekantelt werden und ermöglicht so eine aktive Stimulierung der rückwärtigen Rumpfmuskulatur.



Eine optimierte Greifreifenstellung ist durch den einstellbaren Radsturz sowie durch die individuell einstellbare Standposition zu erreichen.

In der Grundkonzeption des TODD ist der Schwerpunkt des Nutzers direkt über der Drehachse des Stehtrainers positioniert, wodurch sehr gutes Handling und Wendigkeit erreicht wird.

Die Weite der Greifreifen ist durch den einstellbaren Radsturz individuell an die Greifmöglichkeiten des Kindes oder Jugendlichen anpassbar.

Für eine optimierte Standhöhe des Nutzers zu den Antriebsrädern ist die Fußplatte in der Höhe einstellbar und unterschiedliche

Radgrößen können ausgewählt werden. Eine bestmögliche Umsetzung der zur Verfügung stehenden Kraft wird so gewährleistet und ermöglicht eine Anpassung nach Wachstumsphasen.



Die Fußplatte bietet vielfältige Einstellmöglichkeiten zur individuellen Anpassung.

TIM

...Stehen mit Abwechslung



Abb. Grundmodell TIM Größe 2
zusätzlich mit am Schwenkarm montierter Rückenpelotte und Kniepelotten mit einstellbaren Anlagebügeln



Die Mittelsäule ist von (-)15° bis 45° mechanisch verstellbar



Rückenpelotte, montiert am Schwenkarm



Holztherapietisch mit Rand

Der Stehtrainer TIM ist in 3 Größen erhältlich und ermöglicht die achsengerechte Vertikalisierung von Kindern und Jugendlichen.

Über die Körperstützen, wie die Knie-, Gesäß-, Spinen-, Becken-, Brust- und Rückenpelotten wird die Stehposition geführt und die Muskelspannung in den Beinen gesenkt. Durch den Einsatz des Stehtrainers TIM werden die Gelenke achsengerecht belastet und die physiologische Ausbildung der Gelenke unterstützt. Zudem wird die Stabilität im Rumpf gefördert und Kopfkontrolle verbessert.

TIM kann stufenlos bis zu 45° in die Vorlage und 15° in die Rücklage verstellt werden. Durch die Einstellung des Tim in die Vorlage werden die gewünschten Bereiche der Rumpfmuskulatur aktiviert.

Dieses Training kann bei dem Stehtrainer TIM unterbrochen werden, indem die Mittelsäule in die Vertikale oder sogar in die Rücklage, als Entlastungsposition,

gebracht wird. Dieser Wechsel im Training ist möglich, ohne den Nutzer umlagern zu müssen, und kann somit während der Nutzung des Stehtrainers mehrmals wiederholt werden. Auf diese Weise kann die Therapiedauer im Stehtrainer sukzessiv verlängert und dadurch die positiven Aspekte des Stehens besser erarbeitet werden.

Mittels einer Hand-Kurbel ist die Gesäßpelotte horizontal zu verstellen, um so einer vorhandenen Knie- oder Hüftbeugekontraktur entgegen zu wirken. Die kombinierte Spinen- und Beckenpelotte positioniert in Wechselwirkung mit der Gesäßpelotte das Becken und fördert dadurch die Aktivität im Rumpf und in den oberen Extremitäten. Die Kniepelotten bieten in jeder gewünschten Kniegelenksposition eine größtmögliche und damit druckreduzierende Auflagefläche. Gleichzeitig bleibt die Kniescheibe frei und damit ohne direkte Druckbelastung.



Dreidimensional einstellbare Kniepelotten



Die Fußplatte bietet vielfältige Einstellmöglichkeiten zur individuellen Anpassung

TONI

...der umfassende Stehtrainer



Abb. Grundmodell TONI Größe 2
zusätzlich mit Knieplotten, Becken- und Rumpfpelotte und Therapietisch



Höhenverstellung mittels Kurbel, auch während der Nutzung zu bedienen



360° Drehfunktion um die Hauptsäule



Kantelung zur Bauchlage mittels Gasdruckfeder



Tisch mit großer Therapiemulde



Die zu öffnenden Becken- und Rumpfpelotten vereinfachen den Transfer und bieten einen an die Körpermaße angepassten, sicheren und umfassenden Halt

Der umfassende Stehtrainer TONI ist in 2 Größen erhältlich und bietet neue Möglichkeiten der Stehtherapie durch die einzigartige Drehfunktion der zentralen Säule um 360°. Die stufenlose Einstellbarkeit der Standhöhe während der Nutzung macht es möglich, die optimale Höhe für den Transfer und für die Therapie einzustellen.

Dreidimensional einstellbare Fußplatten bilden die Basis für einen sicheren und korrekten Stand. Die Kniepelotten lassen sich stufenlos in der Tiefe und Breite einstellen und ermöglichen so auch die Nutzung bei Kontrakturen im Kniebereich.

Becken- sowie Rumpfpelotten umfassen den Körper, lassen sich individuell anpassen und vermitteln dem Kind eine angenehme und sichere Unterstützung.

Die neuartige Verschlussstechnik vereinfacht den Transfer wesentlich und ermöglicht Eltern und Therapeuten die Einbindung der Stehtherapie in den Alltag. Die Vorlage lässt sich zur leichteren Bedienung mittels Gasdruckfederunterstützung bis zu 35° verstellen. Hierdurch werden die Beine entlastet und die Rückenmuskulatur aktiviert.

BASTI

...bequem duschen und baden





Zentrale Verstellung des Rückenwinkels



Abklappbares Kopfteil



Kopfstütze und Brustgurt für zusätzlichen Halt



Optionaler Bezug mit integrierter Beckenmulde

Die vielfältige Bade- und Duschieliege BASTI, erhältlich in vier Größen, bietet Sicherheit und Spaß beim Baden und unterstützt Kinder und Jugendliche, die nicht frei sitzen können. In Kombination mit einem fahrbaren Untergestell kann BASTI auch als Duschieliege verwendet werden.

BASTI kann dank der Rücken- und Kniewinkelverstellung optimal in die gewünschte und für das Kind bequeme Position gebracht werden. Mittels des abklappbaren Kopfteils wird das Waschen der Haare mühelos und aufgrund der niedrigen Sitzhöhe bedarf es beim Baden nur einer geringen Wassermenge.

Der abnehmbare Bezug bietet die Möglichkeit, eine individuelle Sitzmulde zu formen und kann bei 30°C gewaschen werden.

Darüber hinaus ist ein weiterer Bezug mit integrierter Beckenmulde und einstellbarer Tuberkante erhältlich, der nicht nur die Sitzfläche definiert, sondern zusätzlich den Sitz von Kindern stabilisiert und die Basis für mehr Aufrichtung beim Sitzen bildet. Für zusätzlichen Halt sind Kopfführungspolster und ein weiterer Haltegurt für den Brust- und Beckenbereich erhältlich.

Durch die leichte und kompakte Bauweise lässt sich BASTI platzsparend zusammenlegen und eignet sich auch für den Einsatz im Sandkasten oder am Meer.

...BASTI

SMILLA

...fördert und unterstützt die Entwicklung des Kindes im Alltag



Abb. Grundmodell SMILLA
zusätzlich mit Kopfstütze, Seiten- und Hüftpelotten

Der aufsteckbare Therapietisch
ist durch die Armlehnen
in der Höhe einstellbar



Sitzhöhe kann an die jeweilige Tischhöhe
angepasst werden



Höheneinstellbare und gepolsterte
Kopfstütze



Hüftpelotten definieren die Sitzbreite
und Seitenpelotten unterstützen den
Oberkörper



Doppelaufrollen für den mobilen Einsatz

SMILLA, die praktische Sitzhilfe für den Alltag, fördert das aktive Sitzen und unterstützt dabei die Entwicklung des Kindes. Sie ist für Kinder und Jugendliche konzipiert, die nicht frei sitzen oder stehen können, aber deren eingeschränkte Rumpfhaltung ein Sitzen in einer Sitzschale nicht ständig erfordert.

In der Grundausstattung lassen sich bereits die Sitztiefe, Rückenhöhe und -winkel sowie die Unterschenkellänge individuell einstellen. Dadurch wächst SMILLA mit dem Kind mit und begleitet es über einen langen Zeitraum. Über die einstellbare Sitzhöhe wird zudem eine Anpassung an die vorhandene Tischhöhe ermöglicht, sodass das Kind am täglichen Geschehen teilnehmen kann. Sitz- und Rückenpolster sind im Lieferumfang enthalten. Individuelle Sitz- und Rückeneinheiten können verwendet werden.

SMILLA kann durch vielseitiges therapeutisches Zubehör erweitert werden. So kann die Sitzbreite durch Hüftpelotten begrenzt und der Oberkörper mittels einstellbarer Seitenpelotten unterstützt werden. Ein aufsteckbarer Therapietisch stabilisiert das Kind, gibt Sicherheit und ermöglicht verschiedene Aktivitäten. Als Anlagefläche für den Kopf ist eine gepolsterte und höhen-einstellbare Kopfstütze erhältlich.

Für den alltäglichen Gebrauch ist SMILLA zudem mit Laufrollen erweiterbar. So kann sie auch mobil innerhalb der Wohnung oder Einrichtung eingesetzt werden und ermöglicht einen sicheren Transfer des Kindes.

...SMILLA

Innovation in der Kinder-Reha

Unter dieser Leitlinie steht unsere Arbeit. So geben wir der Weiterentwicklung in der Rehabilitation wertvolle Impulse und verhelfen Kindern und Jugendlichen mit unseren Produkten zu einem selbstbestimmteren Leben.

Mit diesem Anspruch stehen wir auch Ihnen als kompetenter Partner mit Rat und Tat zur Seite, um Sie in der täglichen Praxis zu unterstützen.

 schuchmann®

- Sitzhilfen
- Fahrhilfen
- Mobilitäts- und Therapiehilfen
- Bad- und Hygienehilfen
- Korrekturhilfen
- Vertrieb von Produkten namhafter Hersteller
- Individuelle Anfertigung und Anpassung
- Neu- und Weiterentwicklung

Schuchmann GmbH & Co. KG

Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Fon 05405 909-0 · Fax 05405 909-109
www.schuchmann-reha.de